


Ataches magnéticos para sobredentaduras



Aliada Dental S.L.U
info@aliadadental.es

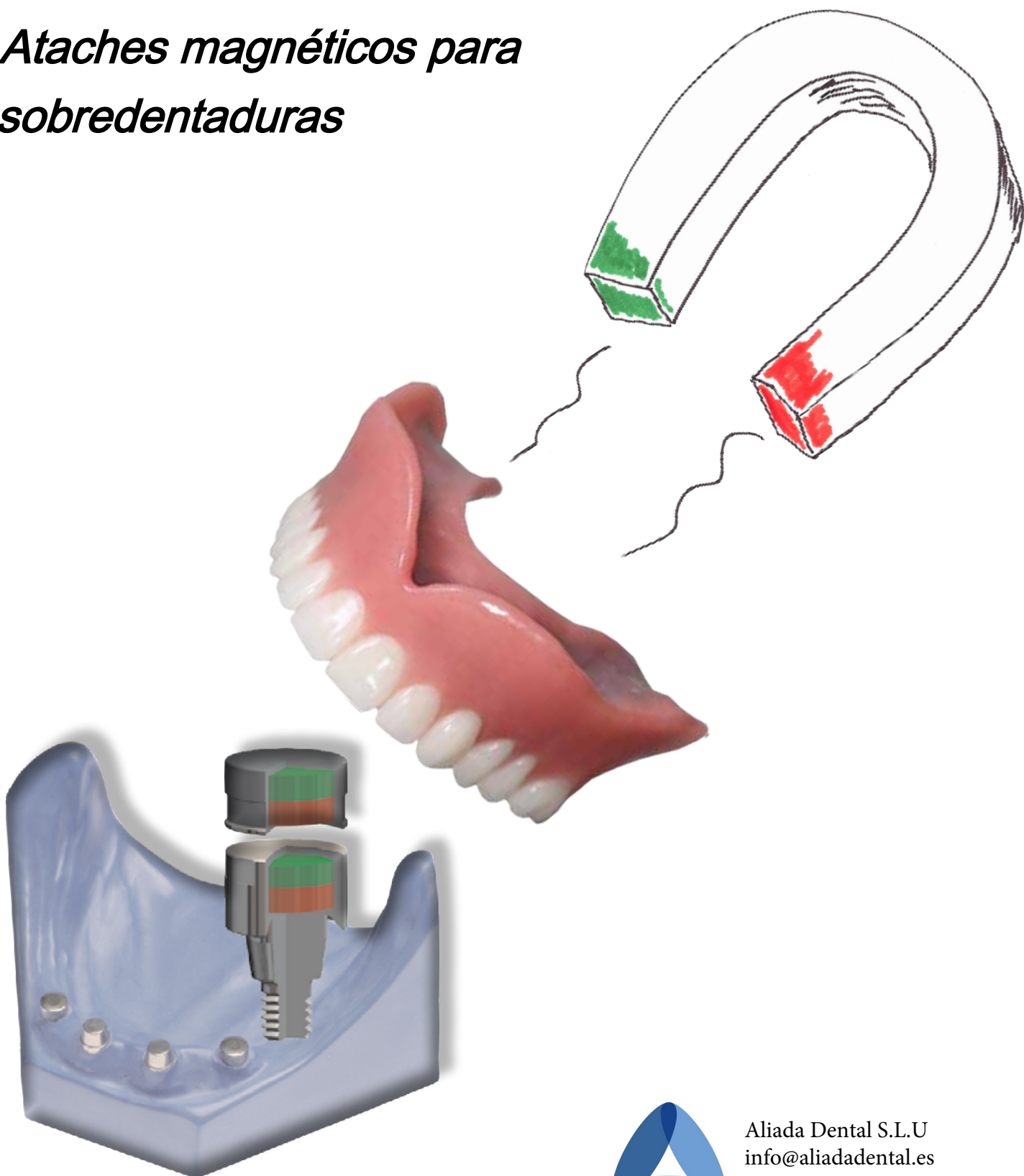

Vicente Castro Lareo
+34 605697679
+34 981101057



www.aliadadental.es

<i>Introducción a Steco Titanmagnetics</i>	2	- OT-F ₂₀₀ y OT-F ₃₁ [OT medical]	20
<i>Principio de construcción</i>	3	- proWital [Implantes forestales]	21
<i>Imanes esféricos</i>	4	- Screw-Vent	21
<i>Imanes cónicos</i>	5	- Semados [Bego Implant Systems]	21
<i>Equipamiento</i>	6	- SIC [SIC Invent] *	21
		- Osseotita TG [Biomet3i]	22
		- Thommen [Thommen Medical]	22
		- tioLogic [Implantes Dentaurem] *	22
		- UniHex [bloqueo interno]	22
<i>Componentes de laboratorio</i>	7		
		<i>Componentes</i>	23
<i>Colocación en gabinete</i>	8	<i>Inserto de apriete para llave dinanométrica</i>	24
<i>Colocación en boca paso a paso</i>	9	<i>Modelos para mejorar la comunicación con los pacientes</i>	25
<i>Nuevas dentaduras hechas en laboratorio</i>	10	<i>Sistema para sobredentaduras fijadas en conductos radiculares</i>	26
<i>Nuevas dentaduras paso a paso</i>	11	<i>Componentes para sistemas de imanes sobre raíces</i>	27
		<i>Detalle imanes de extrusión</i>	28-29
- Ankylos [Dentsply IH]	12	<i>StecoTitanmagnetics® notas del producto</i>	30
- Brånemark [Nobel Biocare]	13		
- Camlog / Conelog [Camlog]	14		
- BoneLevel [Straumann]	15		
- XIVE / Frialit-2	16		
- Endopore [Soluciones de implantes Sybron]	17		
- FairImplant [FairImplant]	17		
- Impla [Schütz Dental] *	18		
- Impladent [Lasak] *	18		
- IMZ [Implantes Dentsply]	18		
- Neoss [Neoss]	19		
- Nobel Replace [Nobel Biocare]	19		
- Oktagon [Dental Ratio]	19		
- OsseoSpeed TX [Astra Tech]	19		
-			


Todos los productos marcados en el catálogo con *) números de asterisco se refieren a los productos que se venden exclusivamente a través de fabricantes de implantes seleccionados. Por la exactitud de los números extranjeros no nos hacemos responsables. Los nombres de implantes mencionados en esta y las páginas siguientes son marcas comerciales de sus respectivos fabricantes.

Ataches magnéticos para prótesis completas implanto-soportadas

Esta solución soportada por implantes también está disponible sobre raíces.

Está pensada para pacientes de la 3ª edad con patologías reumáticas, con la motricidad fina afectada o que se prevea que puede verse afectada en un futuro.

StecoTitanmagnetics® también se puede utilizar con implantes cortos.

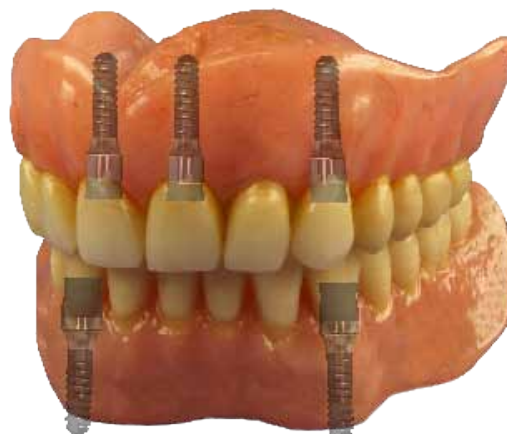


Se puede utilizar con más de 60 conexiones de implantes diferentes.

Ventajas:


- Fácil de usar
- Fácil de limpiar
- Ahorro de costes
- Universal
- la dentadura es fácil de poner y sacar
- superficies pulidas, sin cortes
- no requiere la sustitución de elementos de retención de nylon como en otros sistemas
- Múltiples líneas de productos para los principales sistemas de implantes.

El principio de la construcción

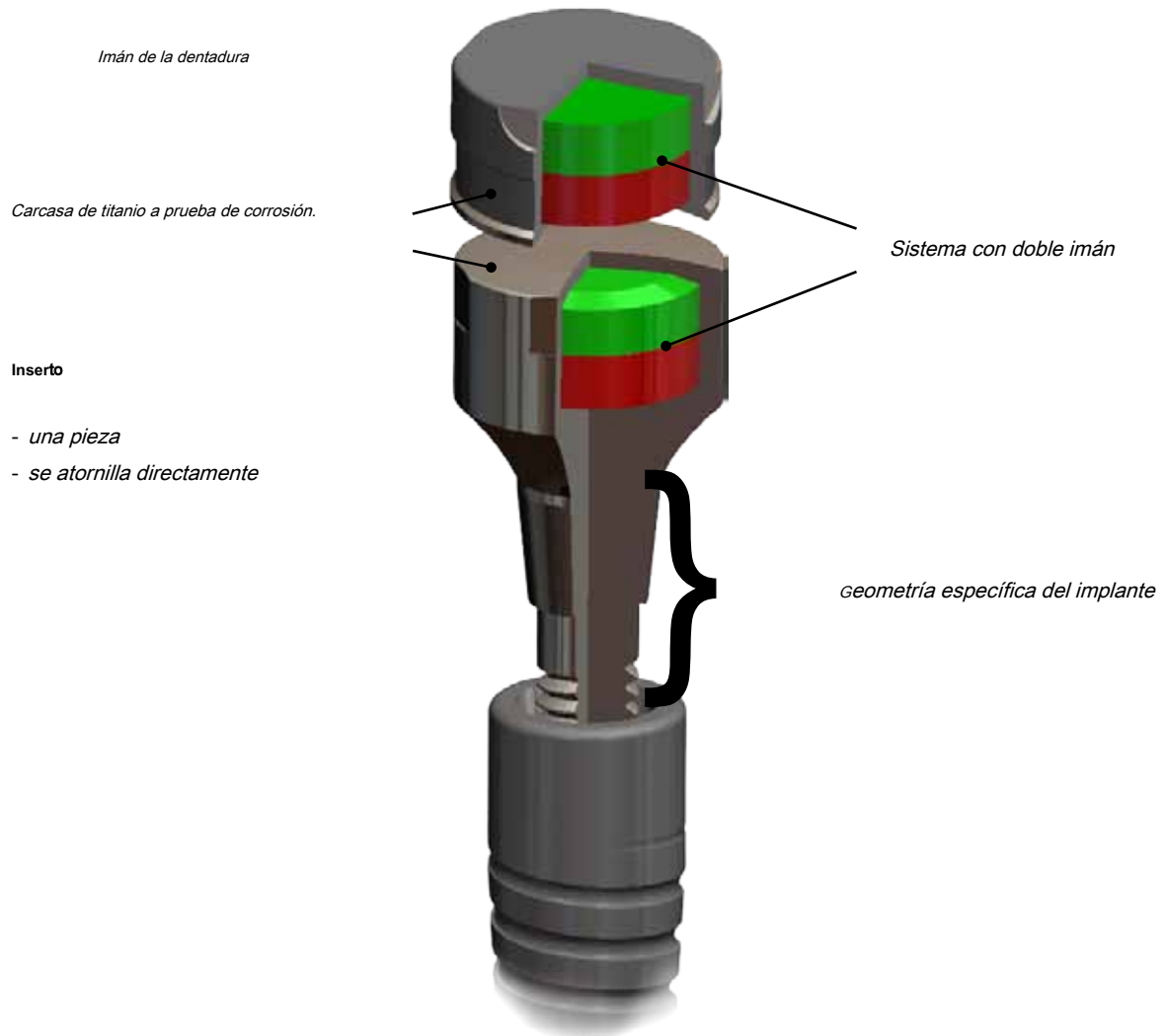

Sistema de doble imán

Dos campos magnéticos abiertos ejercen una fuerza de atracción en una distancia más larga que los sistemas monoimán.

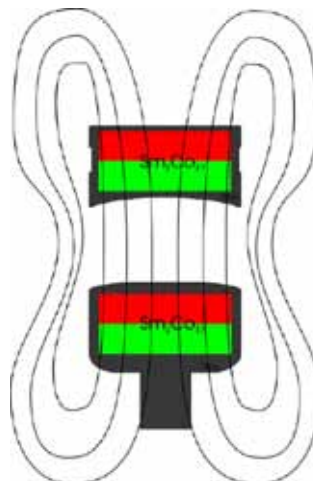

Imanes esféricos

- superficie ligeramente curvada
- autocentrado
- ejercer la fuerza lateral más baja en el implante
- especialmente indicado para implantes cortos
- los tres números finales del número REF indica la altura, por ejemplo, I.01.02.X325 = 3.25 mm



X-Line

Altura
2,65 mm



Imán de la dentadura

Z-Line

Altura
3,15 mm



Altura gingival



Inserto



Altura gingival

Diámetro de la cabeza

ø 4.80 mm

ø 5.80 mm

Fuerza de retención

1,6 N (163 g)

3,0 N (300 g)

Imanes cónicos

- forma cónica de 10 °
- absorbe fuerzas laterales
- estabiliza la dentadura para evitar el movimiento lateral
- la longitud mínima recomendada del implante es de 12 mm
- los tres números finales del número REFin dica la altura, por ejemplo, I.01.02.K150 = 1.50 mm



Línea K

Imán de la dentadura



Altura
5,00 mm

ø 5.20 mm

Inserto



2,40 mm

Altura gingival

Diámetro de la cabeza

ø 5.20 mm

Fuerza de retención

1,6 N (163 g)

Inserto de llave dinamométrica

- adecuado para todas las llaves dinamométricas comunes
- manejo seguro gracias al acoplamiento

Para todos los trinquetes compatibles, consulte la página 30.



Junta de posicionamiento / anillo de resistencia

La junta de posicionamiento garantiza que el imán de la dentadura se polimerice en el lugar correcto. El anillo de resistencia evita que los dos imanes se unan

- protege el implante y el tejido
- ideal para usar en el gabinete
- distancia de resistencia en la línea X y la línea Z utilizando la junta de posicionamiento (= 0.3 mm)
- distancia de resistencia en la línea K utilizando el anillo de resistencia (= 0.3 mm)



X-Line




Línea K



Equipamiento para el laboratorio.

Para hacer una nueva dentadura, cada línea de productos tiene su propio poste de impresión compatible y réplica de laboratorio.

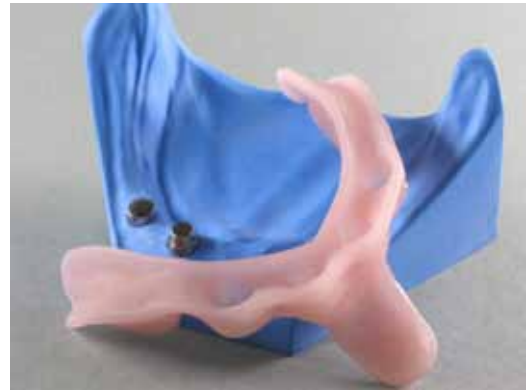

Cofías de impresión

- impresión magnética sin tornillos
- bloquear magnéticamente en el inserto
- La geometría externa permite una fijación segura en el material de impresión
- Para la línea K se puede usar el imán de la dentadura a modo de poste de impresión

X-Line



Línea K



X-Line



Línea K



con imán, recubierto
con titanio


Réplicas de laboratorio

- para hacer modelos de forma rápida e higiénica
- el implante original no tiene que usarse en el inserto
- no hay necesidad de una limpieza prolongada




sin imán, acero
inoxidable magnético

X-Line

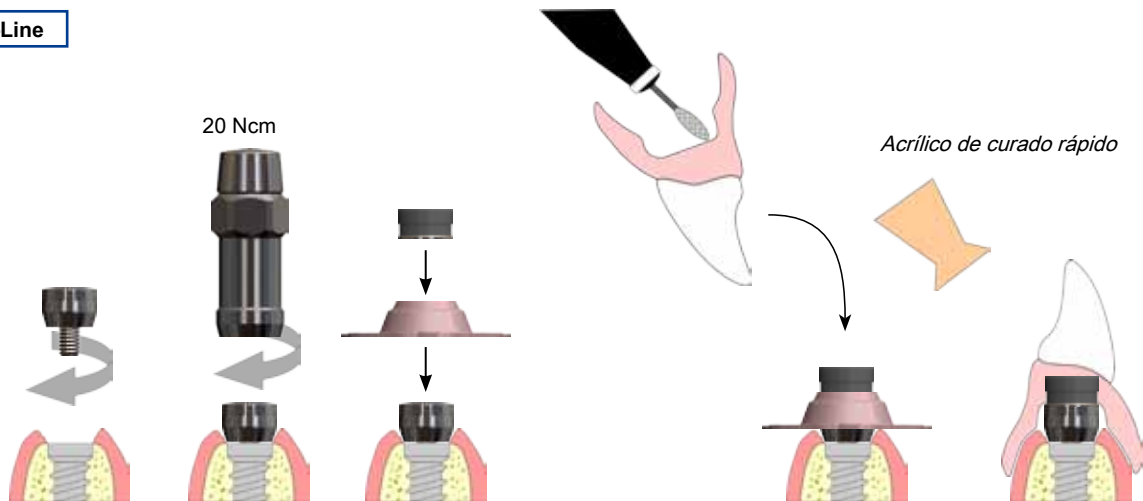

Inserto	Inserto de llave dinamométrica	Junta de posicionamiento	Imán de la dentadura
Yo X ...	H. X ...	P.00.01.X1 P.00.01.X2	U.00.01.X265R

Línea K

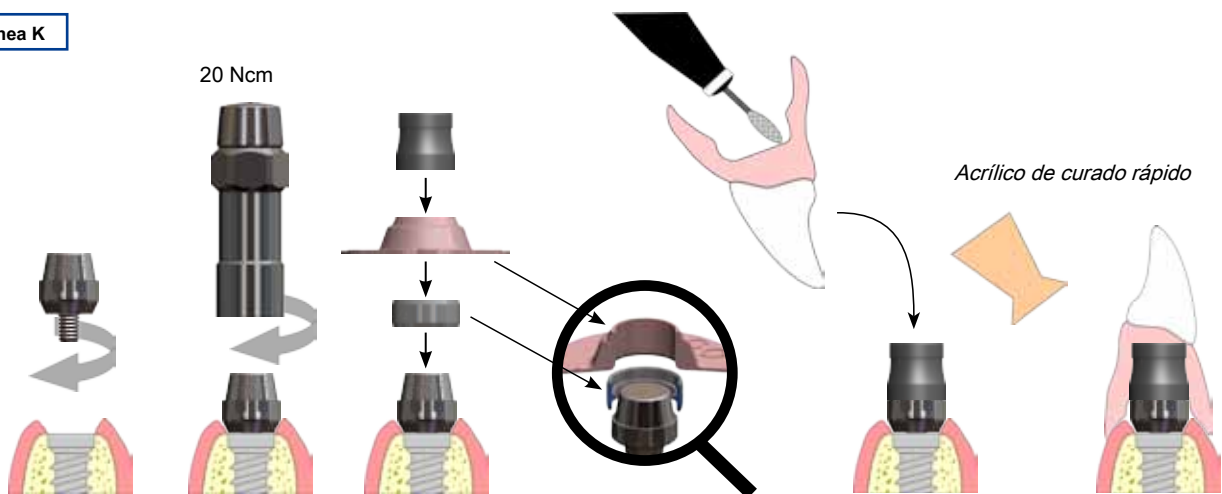

Inserto	Inserto de llave dinamométrica	Anillo de resistencia	Junta de posicionamiento	Imán de la dentadura
YO. ... K ...	H. K ...	P.00.05.K1	P.00.01.K1 P.00.01.K2	U.00.01.K500



StecoTitanmagnetics® se atornillan con un par de 20 N / cm. Hay insertos de llave dinamométrica disponibles para numerosas llaves dinamométricas específicas para implantes (página 28).



Póngase los anillos de resistencia, la junta de posicionamiento y el imán para dentaduras postizas (por ejemplo, en la línea K).




Rellene la base de la dentadura pulida conacrílico de curado, inserte las dentaduras y deje que cure elacrílico.




Trabajo de acabado basal en la dentadura postiza (prótesis inferior terminada).

X-Line

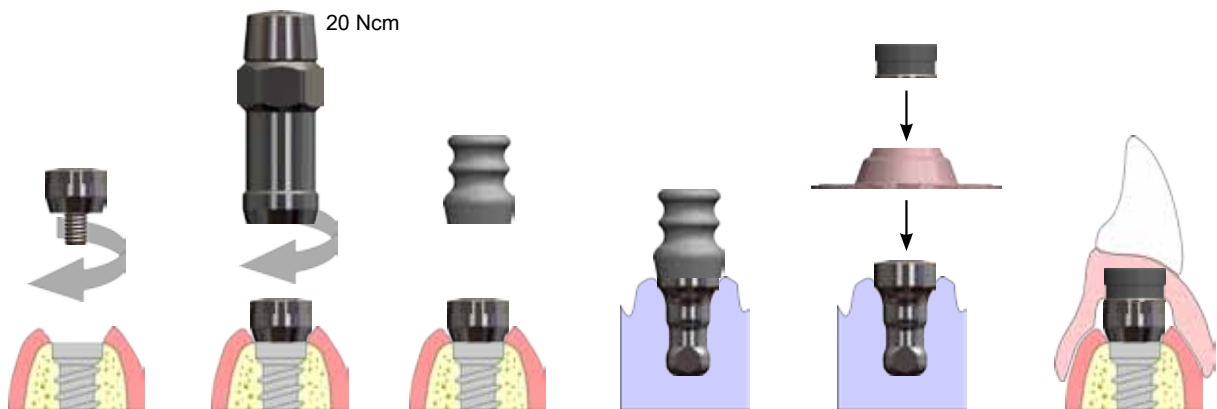

<i>Inserto</i>	<i>Llave de apriete</i>	<i>Cofia de impresión</i>	<i>Réplica de implante</i>	<i>Junta de posicionamiento</i>	<i>Imán de la dentadura</i>
				 P.00.01.X1  P.00.01.X2	 U.00.01.X265R
YO. X ..	H. X ...	A.00.02.X695 M.00.01.X900			

Línea K

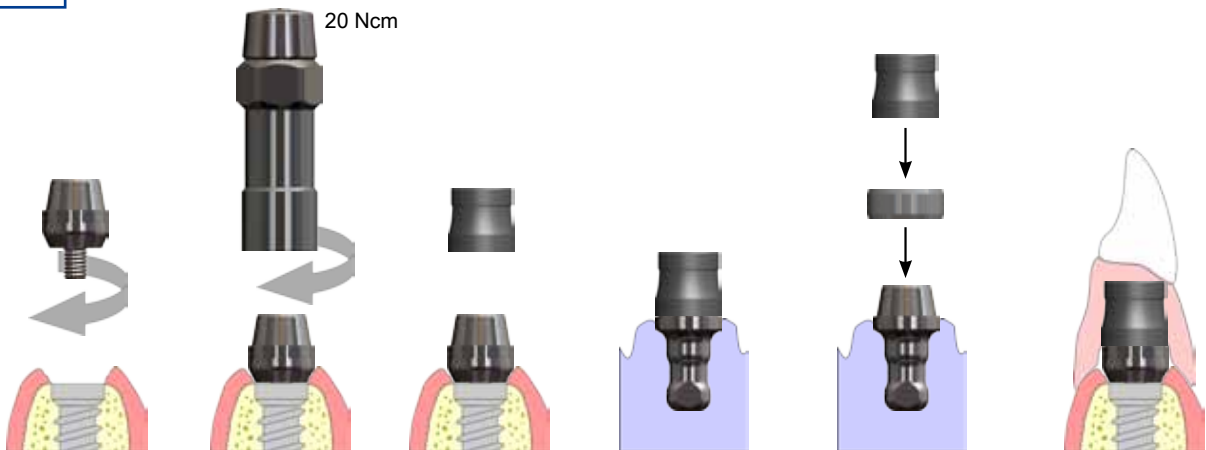

<i>Inserto</i>	<i>Llave de apriete</i>	<i>El imán de la dentadura también se utiliza como poste de impresión</i>	<i>Réplica de Implante</i>	<i>Anillo de resistencia</i>
		 U.00.01.K500		 U.00.01.X265R
YO. X ...	H. X ...		M.00.01.K750	



*Atornillar el
StecoTitanmagnetics
con 20 Ncm*



*Nunca atornillar o
desenroscar con alicates*



*Impresión funcional con
postes de impresión*



*Plantilla de relación de mandíbula
fijada por
StecoTitanmagnetics®*



*Encerado en plantilla
retenida imán*



*Modelo fundido en
el modelo duplicado*



*Imanes fijos en modelo
marco fundido*




Dentadura terminada



*Inserto e
imán dentadura*

Ankylos C/X


X-Line

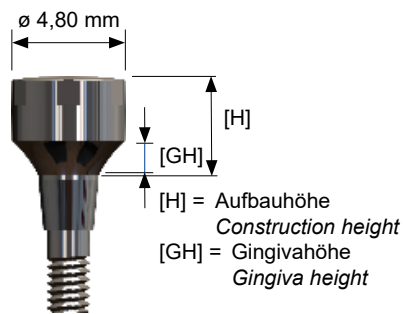

Ankylos C/X [Dentsply Implants]

C/ (ohne Index) / without index		
H	GH	REF
3,00	1,50	I.03.04.X440
4,50	3,00	I.03.04.X590

K-Line

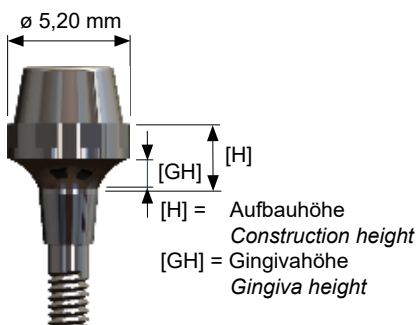

Ankylos C/X [Dentsply Implants]

C/ (ohne Index) / without index		
H	GH	REF
2,95	1,30	I.03.04.K295
4,45	2,40	I.03.04.K445

Sie haben noch ein altes nicht indexiertes Ankylos plus Implantat zu versorgen?
 Fragen Sie uns, wir haben auch dafür die passenden Inserts.
 Do you have to supply an old unmarked Ankylos plus implant?
 Please ask us, we have the compatible inserts.


Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmomentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
 Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page .

X-Line


Compatible con conexiones similares como: Avinent®, Biomet 3i®, BTK®, Speedy®, BTI®, Intralock®, Lifecore®, MIS®, Mozograu®, Tricare®, Galimplant®, Osstem®, Imtec®, Megagen, Neobiotech®, ACE®, Biogenesis®, Cowellmedi®, DIO®

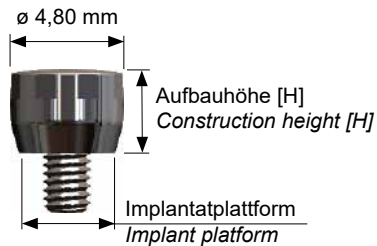

Brånemark [Nobel Biocare]

Implantatplattform / Implant platform					
RP		WP		NP	
H	REF	H	REF	H	REF
3,50	I.02.01.X350	4,35	I.02.03.X435	3,50	I.02.04.X350
5,00	I.02.01.X500	5,40	I.02.03.X540	5,00	I.02.04.X500
6,50	I.02.01.X650	6,50	I.02.03.X650	6,50	I.02.04.X650


K-Line

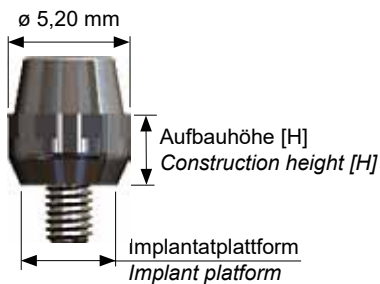

Brånemark [Nobel Biocare]

Implantatplattform Implant platform	
RP	
H	REF
3,00	I.02.01.K300
4,50	I.02.01.K450

Z-Line

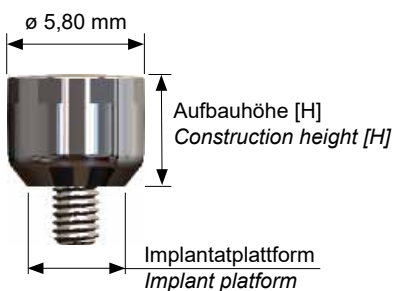

Brånemark [Nobel Biocare]

Implantatplattform / Implant platform			
RP		WP	
H	REF	H	REF
4,75	I.02.01.Z475	4,75	I.02.03.Z475
6,00	I.02.01.Z600	6,00	I.02.03.Z600


Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		 H.00.04.X2	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1	 H.00.04.K2	 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1		 H.00.04.Z2	 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000


* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

Camlog/ Conelog


X-Line

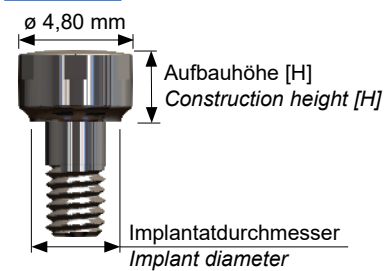

K-Line

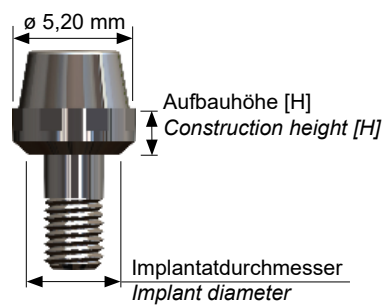

X-Line

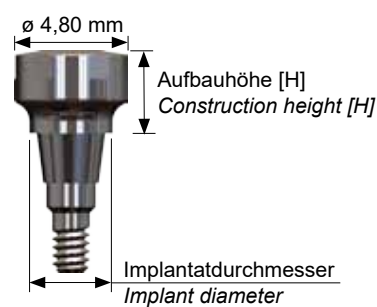

K-Line



Camlog [Camlog]

Implantatdurchmesser / Implant diameter							
Ø 3,30		Ø 3,80		Ø 4,30		Ø 5,00	
H	REF	H	REF	H	REF	H	REF
3,00	I.33.01.X300	3,00	I.33.02.X300	3,00	I.33.03.X300	3,00	I.33.04.X300
4,50	I.33.01.X450	4,50	I.33.02.X450	4,50	I.33.03.X450	4,50	I.33.04.X450

Camlog [Camlog]

Implantatdurchmesser / Implant diameter							
Ø 3,30		Ø 3,80		Ø 4,30		Ø 5,00	
H	REF	H	REF	H	REF	H	REF
2,00	I.33.01.K200	2,00	I.33.02.K200	2,00	I.33.03.K200	2,00	I.33.04.K200
3,50	I.33.01.K350	3,50	I.33.02.K350	3,50	I.33.03.K350	3,50	I.33.04.K350

Conelog [Camlog]

Ø 3,80 + Ø 4,30	
H	REF
3,50	I.58.01.X350
5,00	I.58.01.X500

Conelog [Camlog]

Ø 3,80 + Ø 4,30	
H	REF
2,50	I.58.01.K250
4,00	I.58.01.K400

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		 H.00.04.X3	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1	 H.00.04.K3	 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

X-Line



Straumann [Straumann]

Regular Neck (RN)	
H	REF
3,25	I.01.02.X325
4,75	I.01.02.X475

Z-Line



Straumann [Straumann]

Regular Neck (RN)	
H	REF
3,75	I.01.02.Z375

K-Line



Straumann [Straumann]

Regular Neck (RN)	
H	REF
1,50	I.01.02.K150

BoneLevel [Straumann]

Produktlinie Product line		NC Ø 3,30		RC Ø 4,10	
		H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,50	I.01.04.X350	3,50	I.01.05.X350
		5,00	I.01.04.X500	5,00	I.01.05.X500
	K-Line (ø 5,2mm)	3,00	I.01.04.K300	3,00	I.01.05.K300
		4,50	I.01.04.K450	4,50	I.01.05.K450


Compatible con Straumann® ITI 4.8 tissue level y conexiones similares: Lifecore Medical®, Megagen®, Biogenesis®, Anthogyr®, BTK®, Cowellmedi®, Dentis®, Dentium®, Euroteknika®, Implant Direct®, Miss Medical®, Osstem Implant®, Zimmer Swisspluss 4.8....

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		 H.00.04.X4	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1	 H.00.04.K4	 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1		 H.00.04.Z4	 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

X-Line

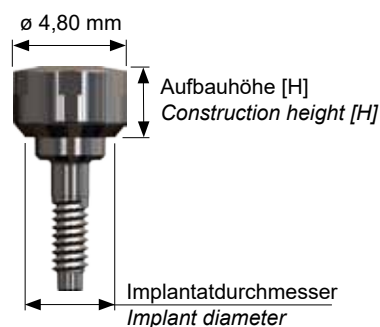

XIVE / Frialit-2 [Dentsply Implants]

Implantatdurchmesser / Implant diameter							
$\varnothing 3,40$		$\varnothing 3,80$		$\varnothing 4,50$		$\varnothing 5,50$	
H	REF	H	REF	H	REF	H	REF
3,00	I.06.05.X300	3,00	I.06.01.X300	3,00	I.06.02.X300	3,00	I.06.03.X300
4,50	I.06.05.X450	4,50	I.06.01.X450	4,50	I.06.02.X450	4,50	I.06.03.X450
		6,00	I.06.01.X600	6,00	I.06.02.X600	6,00	I.06.03.X600


K-Line



XIVE / Frialit-2 [Dentsply Implants]

Implantatdurchmesser / Implant diameter					
$\varnothing 3,40$		$\varnothing 3,80$		$\varnothing 4,50$	
H	REF	H	REF	H	REF
2,00	I.06.05.K200	2,00	I.06.01.K200	2,00	I.06.02.K200
3,50	I.06.05.K350	3,50	I.06.01.K350	3,50	I.06.02.K350

Z-Line

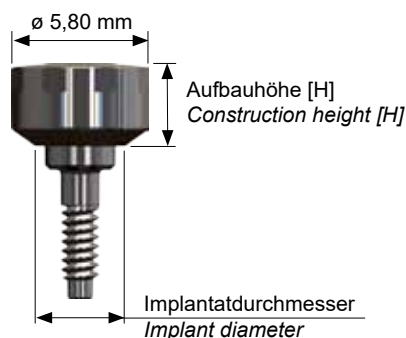

XIVE / Frialit-2 [Dentsply Implants]

Implantatdurchmesser / Implant diameter							
$\varnothing 3,80$		$\varnothing 4,50$		$\varnothing 5,50$		$\varnothing 6,00$	
H	REF	H	REF	H	REF	H	REF
3,50	I.06.01.Z350	3,50	I.06.02.Z350	3,50	I.06.03.Z350	3,50	I.06.04.Z350
				5,00	I.06.03.Z500	5,00	I.06.04.Z500

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		 H.00.04.X1**	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1	 H.00.04.K1**	 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1		 H.00.04.Z1**	 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

**Für Frialit-2-Schraubendreher 45/5722 / For Frialit-2 screwdriver 45/5722

Compress [IGfZ]

Produktlinie Product line		Ø 3,90	
		H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	4,50	I.29.01.X450

Endopore Innenhex [Sybron Implant Solutions]

Produktlinie Product line		Ø 4,10		Ø 5,00	
		H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	2,75	I.51.01.X275	2,75	I.51.02.X275
	K-Line (ø 5,2mm)	2,00	I.51.01.K200	2,00	I.51.02.K200

FairImplant [FairImplant]

Produktlinie Product line		FairTwo S	
		H	REF
	K-Line (ø 5,2 mm)	3,00 4,50	40 35 81* 40 35 82*

* Bitte bestellen Sie die Inserts direkt bei FairImplant.
Orders can be made via the company FairImplant.

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmomentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

Impla, Impladent, IMZ

Impla [Schütz Dental]

Produktlinie Product line		Ø 4,20		Ø 5,30	
		H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,00 4,50	635080* 635081*		
	K-Line (ø 5,2mm)	2,25	635095*	2,25	635094*

* Bitte bestellen Sie die Inserts direkt bei Schütz Dental.
Orders can be made via the company Schütz Dental.

Impladent [Lasak]

Produktlinie Product line		Ø 3,70	
		H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,00 4,50	I.50.01.X300* I.50.01.X450*
	K-Line (ø 5,2mm)	2,25 3,50	I.50.01.K225* I.50.01.K350*

* Bitte bestellen Sie die Inserts direkt bei Lasak.
Orders can be made via the company Lasak.

IMZ [Dentsply Implants]

Produktlinie Product line		Ø 3,30		Ø 4,00	
		H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,50 5,00	I.05.01.X350 I.05.01.X500	3,50 5,00	I.05.02.X350 I.05.02.X500
	K-Line (ø 5,2mm)	2,25	I.05.01.K225	2,25	I.05.02.K225
	Z-Line (ø 5,8mm)	4,00	I.05.01.Z400	4,00 6,50	I.05.02.Z400 I.05.02.Z650

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmomentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1			 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

Neoss [Neoss]

Produktlinie Product line		* H REF	
	X-Line (ø 4,8 mm)	2,75	I.48.01.X275
		4,25	I.48.01.X425
	K-Line (ø 5,2 mm)	2,00	I.48.01.K200
		3,50	I.48.01.K350

* Plattform für alle Implantatdurchmesser
Platform for all implant diameters

Nobel Replace Trilobe Innenverbindung [Nobel Biocare] Implant Direct ® y ACE ®

Produktlinie Product line		Ø 3,50		Ø 4,30		Ø 5,00	
	X-Line (ø 4,8 mm)	H	REF	H	REF	H	REF
		3,00 4,50	I.38.01.X300 I.38.01.X450	3,00 4,50	I.38.02.X300 I.38.02.X450	3,00 4,50	I.38.03.X300 I.38.03.X450
	K-Line (ø 5,2 mm)	2,25 3,75	I.38.01.K225 I.38.01.K375	2,25 3,75	I.38.02.K225 I.38.02.K375	2,25 3,75	I.38.03.K225 I.38.03.K375

Oktagon [Dental Ratio]

Produktlinie Product line		Ø 4,80	
	X-Line (ø 4,8 mm)	H	REF
		3,30	I.55.01.X330

OsseoSpeed TX [Astra Tech / Dentsply Implants]

Compatible con Astra® Aqua y conexiones similares como: Osseospeed, Mozograu®, Ticare®, Galimplant®, Neobiotech®, Biogenesis®, Dentis®, DIO®, Megagen® ...

Produktlinie Product line		Ø 3,50 + 4,00	
	X-Line (ø 4,8 mm)	H	REF
		3,50 5,00	I.65.01.X350 I.65.01.X500

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmomentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1			 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

OT-F¹⁻³, Pitt-Easy, Replace

OT-F¹ [OT Medical], Pitt-Easy [ehemals/ formerly Implant Direct]

Produktlinie Product line		Ø 3,25		Ø 3,75		Ø 4,00		Ø 4,90	
		H	REF	H	REF	H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,50 5,00 6,50	I.16.01.X350 I.16.01.X500 I.16.01.X650	3,50 5,00 6,50	I.16.02.X350 I.16.02.X500 I.16.02.X650	3,50 5,00 6,50	I.16.03.X350 I.16.03.X500 I.16.03.X650		
	K-Line (ø 5,2mm)	2,25	I.16.01.K225	2,25	I.16.02.K225	2,25	I.16.03.K225		
	Z-Line (ø 5,8mm)							3,25	I.16.04.Z325

OT-F² + OT-F³ [OT medical]

Produktlinie Product line		Ø 3,40 F2		Ø 3,80 F2 + F3		Ø 4,10 F2 + F3	
		H	REF	H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	3,25	I.56.03.X325	3,25	I.56.01.X325	3,25	I.56.02.X325
	K-Line (ø 5,2 mm)	2,50	I.56.03.K250	2,50	I.56.01.K250	2,50	I.56.02.K250

OT-F¹ → Pitt-Easy

Replace Außensechskant-Verbindung / external hex [Nobel Biocare] *

*Compatible con Replace ®, Implant Direct ® y ACE ®

Produktlinie Product line		Ø 3,50		Ø 4,30		Ø 5,00		Ø 6,00	
		H	REF	H	REF	H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	4,50	I.31.04.X450	4,50	I.31.01.X450	4,50	I.31.02.X450		
	K-Line (ø 5,2mm)	3,50	I.31.04.K350	3,50	I.31.01.K350				
	Z-Line (ø 5,8mm)	5,00	I.31.04.Z500					5,00	I.31.03.Z500

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmo- mentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1			 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

prowital [Prowital]

Produktlinie Product line		Ø 3,50 (gelb)		Ø 4,30 (rot)		Ø 5,00 (blau)	
		H	REF	H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,00	I.47.01.X300	3,00	I.47.02.X300		
		4,50	I.47.01.X450	4,50	I.47.02.X450		
	K-Line (ø 5,2mm)			2,00	I.47.02.K200	2,00	I.47.03.K200
				3,50	I.47.02.K350	3,50	I.47.03.K350

Screw-Vent [Zimmer Dental / Zimmer Biomet]

MIS ®, Bio-Horizon ®, Alpha Bio ®, Implant Direct ® AB Implants ®, ACE ®, Jdental Care ®, Avinent ® ...

Produktlinie Product line		Ø 3,50		Ø 4,50	
		H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	3,00	I.13.01.X300	3,00	I.13.02.X300
		4,50	I.13.01.X450	4,50	I.13.02.X450
	K-Line (ø 5,2 mm)	2,50	I.13.01.K250	2,50	I.13.02.K250

Semados [Bego Implant Systems]

Produktlinie Product line		Ø 3,25 - 4,50	
		H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	4,00	I.08.01.X400
		5,50	I.08.01.X550
	K-Line (ø 5,2 mm)	2,50	I.08.01.K250
	Z-Line (ø 5,8 mm)	3,00	I.08.01.Z300
		5,00	I.08.01.Z500

SIC [SIC invent]

Produktlinie Product line		Ø 4,20	
		H	REF
	K-Line (ø 5,2 mm)	2,25	935095*

* Bitte bestellen Sie die Inserts direkt bei SIC invent.
Orders can be made via the company SIC invent.

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmomentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750
Z-Line	 U.00.01.Z315	 P.00.03.Z1			 A.00.02.Z695	 M.00.01.Z1000

* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

TG Osseotite [Biomet 3i / Zimmer Biomet]

Produktlinie Product line		Ø 4,80	
		H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	3,25	I.32.01.X325
	K-Line (ø 5,2 mm)	1,50 3,00	I.32.01.K150 I.32.01.K300

Thommen [Thommen Medical]

Produktlinie Product line		Ø 4,50		Ø 5,00	
		H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	3,25	I.04.03.X325	3,25 4,75	I.04.04.X325 I.04.04.X475
	K-Line (ø 5,2 mm)	1,75 3,25	I.04.03.K175 I.04.03.K325	1,75	I.04.04.K175

tioLogic [Dentaurum implants]

Produktlinie Product line		S-Serie		M-Serie		L-Serie	
		H	REF	H	REF	H	REF
	X-Line (ø 4,8 mm)	3,00 4,50	I.30.01.X300 I.30.01.X450	3,00 4,50	I.30.02.X300 I.30.02.X450	3,00 4,50	I.30.03.X300 I.30.03.X450

Unihex [Intra-Look]

Produktlinie Product line		Ø 4,00	
		H	REF
	X-Line (ø 4,8mm)	3,50	I.63.01.X350
	K-Line (ø 5,2mm)	2,50	I.63.01.K250

Zubehör/ Equipment

	Prothesenmagnet Denture magnet	Positionsmanschette Positioning cuff	Resilienzring Resilience ring	Ratscheneinsatz Torque wrench insert	Abformpfosten Impression post	Modellimplantat Laboratory replica
X-Line	 U.00.01.X265R	 P.00.01.X1		Für diverse Drehmomentschlüssel Seite 30. For various torque wrenches see page 30	 A.00.02.X695	 M.00.01.X900
K-Line	 U.00.01.K500	 P.00.01.K1	 P.00.05.K1		 U.00.01.K500*	 M.00.01.K750


* K-Line: Für die Abformung bitte Prothesenmagnet verwenden. / K-Line: For the impression please use the denture magnet.
Weiteres Zubehör auf Seite 29. / Another Equipment on page 29.

		<i>Imán de la dentadura</i>	<i>Junta de posicionamiento</i>	<i>Anillo de resistencia</i>	<i>Poste de impresión</i>	<i>Réplica de laboratorio</i>
X-Line	<i>Altura REF</i>	 2,65 mm U.00.01.X265R	 <i>supragingival</i> 0,30 mm * P.00.01.X1		 6,95 mm A.00.02.X695	 <i>magnético</i> 9.00 mm M.00.01.X900
	<i>Altura REF</i>	 1,80 mm U.00.04.X180 *	 <i>subgingival</i> 0,30 mm * P.00.01.X2			 <i>magnético</i> 16,00 mm M.00.01.X1600
	<i>Altura REF</i>					 <i>Acero inoxidable</i> 9.00 mm M.00.05.X900
	<i>Altura REF</i>	 5,00 mm U.00.01.K500	 <i>supragingival</i> 0,0 mm * P.00.01.K1	 0,30 mm ** P.00.05.K1	<i>Para la impresión, use dentadura postiza ¡imán!</i>	 <i>Acero inoxidable</i> 9,90 mm M.00.01.K750
Z-Line	<i>Altura REF</i>		 <i>subgingival</i> 0,0 mm * P.00.01.K2			
	<i>Altura REF</i>	 3,15 mm U.00.01.Z315	 <i>supragingival</i> 0,30 mm * P.00.03.Z1		 6,95 mm A.00.02.Z695	 <i>magnético</i> 10.00 mm M.00.01.Z1000

* Fuerza de retención limitada 1.4 N

** Altura de resiliencia

Inserto de apriete para llave dinanométrica

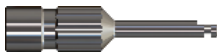Adecuado para:		X-Line	Línea K	Z-Line
Cuadrado / Conexión cuadrada (Patente de EE. UU.) Se adapta a Dynatorq, Dentsply (antiguo),	REF	 H.00.04.X1	 H.00.04.K1	 H.00.04.Z1
ISO 204 (contra ángulo)	REF	 H.00.04.X2	 H.00.04.K2	 H.00.04.Z2
Hexágono /Conexión hexagonal se adapta a Bredent, Camlog, IMZ, pro vital	REF	 H.00.04.X3	 H.00.04.K3	 H.00.04.Z3
Straumann, Neoss	REF	 H.00.04.X4	 H.00.04.K4	 H.00.04.Z4
XIVE / Frialit-2 para destornillador Frialit-2 45/5722	REF	 H.06.01.X1	 H.06.01.K1	 H.06.01.Z1
Impla [Schütz Dental]	REF	 635087 *	 635099 *	
Pitt-Easy	REF	 H.16.01.X1	 H.16.01.K1	
SIC [SIC invent]	REF		 935099 *	
Semados	REF	 H.08.01.X1	 H.08.01.K1	 H.08.01.Z1
tioLogic [Dentaurum implants]	REF	 387-670-00 *		

* *Solicite estos insertos de trinquete directamente a la compañía de implantes correspondiente.

Llave de torque

Adecuado para:		Universal
Conexión hexagonal H.00.04.X3 H.00.04.K3 H.00.04.T3	ÁRBITRO	 O.00.01.DMR20

Los modelos de demostración son una herramienta importante en la comunicación con el paciente.

Ofrecemos varias piezas de demostración, con las que puede hacer sus propios modelos.

Nuestros implantes de demostración de una pieza combinan la superficie funcional de StecoTitanmagnetics® con un implante. Se pueden incorporar rápida y fácilmente con un implante en un modelo de demostración.



Figura	Descripción	Referencia
	Implante de demostración X-Line con imán de dentadura postiza	DI.00.35.X1500
	Implante demo K-Line con imán de dentadura postiza	DI.00.35.K1600

Podemos proporcionarle más información impresa para sus pacientes como folletos publicitarios



Imanes para tapas de postes de raíz fundida

Usando StecoTitanmagnetics ® para las tapas de postes de raíz, el material de raíz residual puede incorporarse rápida y fácilmente en la detección como elementos de retención adicionales.



Método

La tapa del poste raíz se modela utilizando el método habitual, con la ayuda de una funda moldeable y se funde en la aleación deseada. El imán encapsulado de titanio resistente a la corrosión está pegado con un adhesivo compatible oralmente en la tapa del poste raíz pulido (arenado en el interior).

Una vez que la tapa del poste raíz se ha cementado en la boca del paciente, el imán de la dentadura postiza se puede pegar usando el brazalette de posicionamiento especial a la dentadura preparada directamente en el sillón del dentista. Los imanes para dentaduras postizas también se pueden fijar al modelo en el laboratorio.



Obturadores

Los imanes de la tapa del poste raíz también se pueden usar para acoplar obturadores. Para el silicio, los imanes obturadores vienen con un anillo de retención.



StecoTitanmagnetics para tapas de poste raíz con equipo

		Tapa de poste de raíz	Imán de la dentadura	Puño de posicionamiento	Casquillos de modelado	Herramienta de modelado
X-Line	<i>Altura</i>	 2,50 mm	 2,65 mm	 0,30 mm *	 2,05 mm	 32,55 mm M.00.04.X103 (ø 2.35 mm)
	<i>Referencia</i>	V.00.01.X250	U.00.01.X265R	P.00.04.X1	M.00.03.X205 (PU = 2 piezas)	 32,55 mm M.00.04.X123 (ø 3.00 mm)
Z-Line	<i>Altura</i>	 3,00 mm	 3,15 mm			
	<i>Referencia</i>	V.00.01.Z300	U.00.01.Z315			

* Nivel de resiliencia


Imán de dentadura postiza para tapas de poste de raíz fundida con una superficie plana

		Imán de la dentadura
X-Line	<i>Altura</i>	 2,60 mm
	<i>Referencia</i>	V.00.03.X260

Imanes obturadores

		Imán obturador	Imán universal
X-Line	<i>Altura</i>	 2,50 mm	 2,65 mm
	<i>Referencia</i>	V.00.02.X250	U.00.02.X265
Z-Line	<i>Altura</i>		 3,15 mm
	<i>Referencia</i>		U.00.02.Z315

¿Diente fracturado?

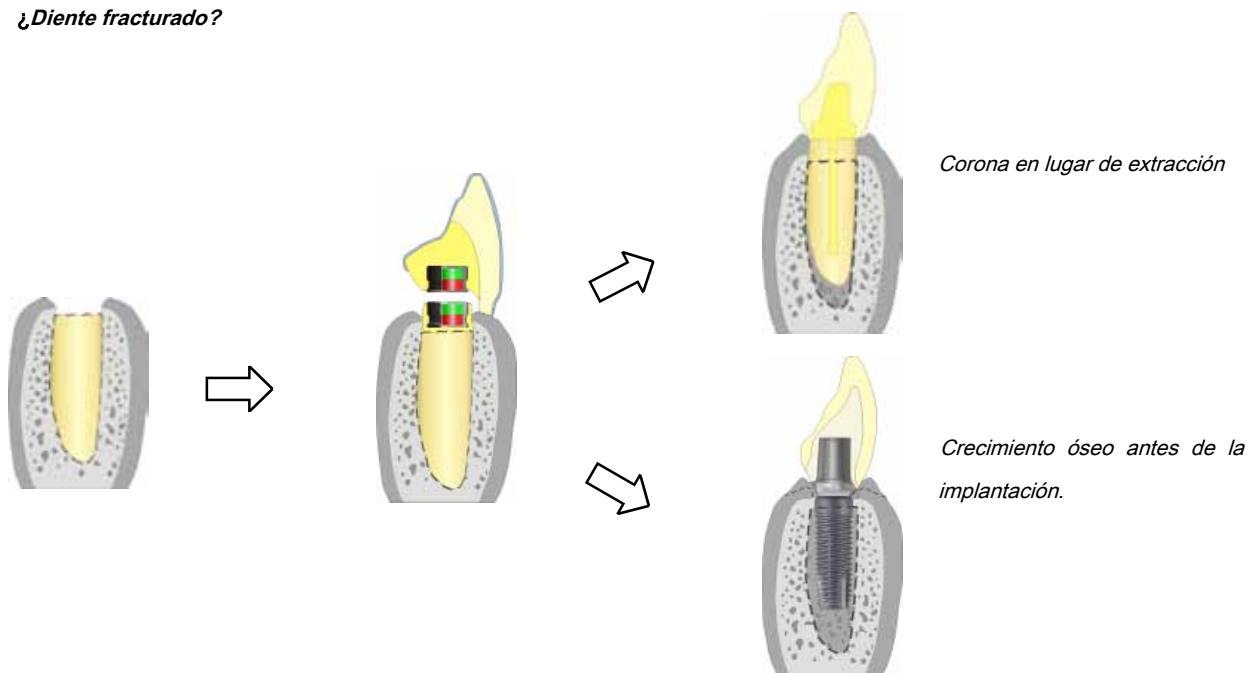

La fuerza magnética mueve la raíz y la encía

Un imán a prueba de corrosión encapsulado en titanio se fija a la raíz. Un segundo imán se fija a una férula o una dentadura temporal a poca distancia. La atracción magnética entre los dos imanes saca la raíz del alvéolo lentamente hasta que ambos imanes se encuentran. Dependiendo del diente, el proceso puede tomar desde varias semanas hasta algunos meses. El tejido óseo debajo de la raíz se acumula y el tejido blando sigue a la raíz a lo largo de la corona.

La fuerza máxima entre los imanes en contacto entre sí es de aproximadamente 1 N (100 g). Con dos ayudas de posicionamiento, la distancia inicial se puede establecer en 1 mm (0,33 N) o 2 mm (0,13 N).

Corona en lugar de extracción

¿La raíz está demasiado fracturada para unir una corona?

Con la extrusión magnética, la raíz se puede extraer del alvéolo para que se pueda colocar una corona sobre él.

Crecimiento óseo antes de la implantación.

Con la ayuda de la extrusión magnética, el propio hueso y tejido gingival del paciente se pueden tirar hacia arriba. El implante se puede insertar de manera más efectiva en el propio tejido óseo del cuerpo, asegurando que las encías se vean más estéticamente agradables.

A diferencia de los imanes disponibles en Internet, StecoTitanmagnetics [®] tener la marca de medicamento CE.

Imán de extrusión individualmente o como conjunto

Imán de extrusión
para la raíz

V.62.001.Y245. R

Ayuda de
posicionamiento

P.62.001. Y100

o/ o

P.62.001. Y200

Imán de extrusión
para la férula

V.62.001.Y245. C.

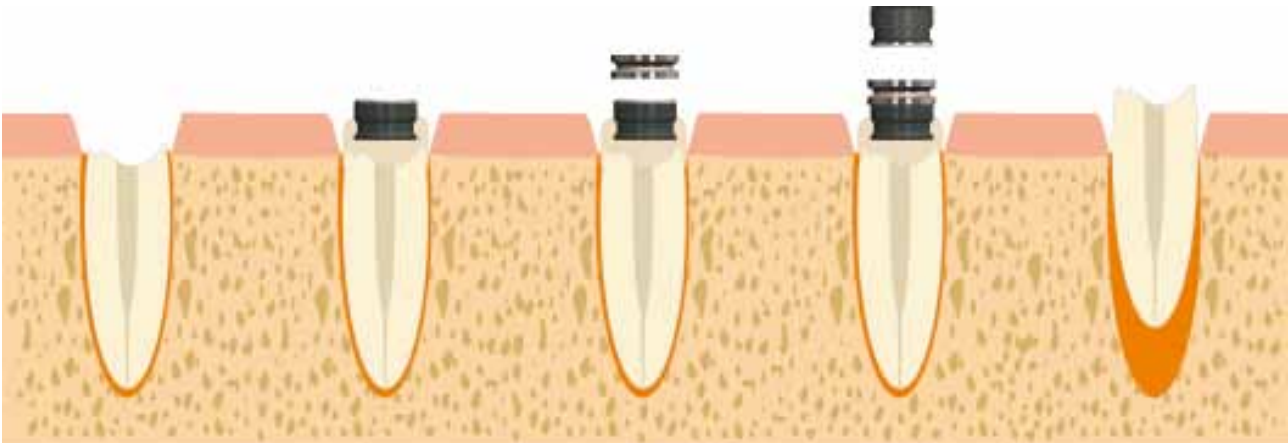


Figura	Descripción	Referencia
	El conjunto de extrusión contiene: 1 imán para férula 1 imán para raíz 1 ayuda de posicionamiento H 1.00 mm (0.33 N) 1 ayuda de posicionamiento H 2.00 mm (0.13 N)	S.62.01.Y1
	Imán de extrusión para la raíz	V.62.01.Y245C
	Imán de extrusión para la raíz	V.62.01.Y245R
	Ayuda de posicionamiento, altura de distancia 1.00 mm	P.62.01.Y100
	Ayuda de posicionamiento, altura de distancia 2.00 mm	P.62.01.Y200

Indicación


1. Geroprotésica: anclaje de dentaduras postizas híbridas y parciales en prótesis clase III- (mandíbula sin dientes) y clase II- (número reducido de dientes) (clasificación según "documento de consenso" 12/2008). Para el tratamiento de clase III con prótesis removibles, se recomiendan 6 implantes en la mandíbula superior y 4 en la mandíbula inferior. Dependiendo de la anatomía de la persona y los requisitos protésicos, puede indicarse uno de los números de publicaciones anteriores. Debido a la fuerza lateral insignificamente baja sobre el implante (solo se aplica a X-Line y Z-Line), incluso se pueden utilizar implantes cortos (6 mm).

2. Prótesis maxilofaciales: anclaje de prótesis faciales y prótesis de resección.

3. Contraindicaciones: disfunciones como el bruxismo. Para StecoTitanmagnetics® Los implantes K-Line deben tener al menos 12 mm de largo. StecoTitanmagnetics® T-Line no debe usarse para el tratamiento oral.

Advertencia

Al usar imanes, se deben tomar precauciones especiales. Al realizar exploraciones MRI / MRT, primero se deben quitar los implantes y las dentaduras para evitar daños en los imanes. Manténgase alejado de dispositivos de almacenamiento de datos magnéticos y dispositivos electrónicos. Los marcapasos no se ven afectados por StecoTitanmagnetics® si se usa correctamente, porque no hay contacto directo (Völkel 1999). ¡Asegúrese de proporcionar esta información al paciente! Los insertos flojos pueden provocar la rotura del hilo y / o dañar el hilo del implante. Los pacientes deben acudir inmediatamente a su consulta dental para que los insertos puedan apretarse nuevamente. Es importante asegurarse de que la prótesis tenga forma de embudo básicamente alrededor de la cabeza magnética.

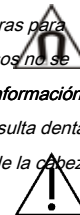

Los núcleos magnéticos pueden soportar temperaturas de hasta 250 °C / 450 °F, lo que significa que no deben soldarse ni soldarse. El calor dañaría irreversiblemente el imán. Los láseres pueden perforar la carcasa. Si la carcasa de titanio está dañada, las piezas deberán cambiarse lo antes posible. Si no, la aleación magnética ($\text{Sm}_{26}\text{Co}_{17}$) se liberaría exponiéndolo a la cavidad bucal y causando daños. Esto puede provocar corrosión y una pérdida de su fuerza magnética, y eventualmente dañar el alojamiento. ¡Nunca muela la carcasa de titanio de hasta 0,2 mm de espesor!



Para gestionar los riesgos, las piezas dañadas deben enviarse de vuelta al fabricante con la referencia del producto y los números de lote, la fecha del implante y la posición del implante. ¡Registre la información del producto (REF, LOT) en el archivo del paciente y el pase del paciente!



Algunos productos de Titanmagnetics están marcados en su etiqueta con un código UDI (HIBC) que contiene información para el fabricante (Steco = ESTO), así como la identificación del dispositivo y la producción.

Campos magnéticos

StecoTitanmagnetics® crear un campo magnético natural y permanente como el de la tierra. No es comparable con el campo electromagnético de un teléfono móvil o líneas de alta tensión. El campo magnético promedio en la superficie de Steco Titan Magnetics® puede alcanzar 186 mT (línea X y K) o 300 mT (línea Z). Esto es inferior a 40 mT (límite de exposición de la OMS) a una distancia de 5 mm de la superficie. No hay evidencia en la literatura actual de que los campos magnéticos estáticos cerca de la superficie del imán con una densidad de flujo magnético de hasta 300 mili Tesla puedan causar daños locales en humanos. StecoTitanmagnetics® puede ser dañado por campos magnéticos externos. Los campos magnéticos muy grandes, como los producidos por los escáneres MRT o los equipos de conmutación eléctrica y de control, pueden debilitar, dañar o incluso revertir el efecto magnético de StecoTitanmagnetics®.



Consejos de esterilización y desinfección.

Los insertos no están embalados en contenedores estériles. Se pueden esterilizar en su embalaje si no está dañado. Recomendamos la esterilización directamente antes de su uso. La esterilización se puede realizar con calor húmedo en un autoclave (método de gravedad o vacío fraccionado 132/134 °C, 3 bar, 5 min). Consulte las instrucciones proporcionadas por el fabricante del equipo de esterilización y solo use procesos validados. Hay instrucciones de reprocesamiento separadas para los insertos de trinquete.





Aliada Dental S.L.U
Av. Finisterre 66, 4ºF Arteixo
15142-A Coruña
info@aliadadental.es



Vicente Castro Lareo
+34 981 101 057
+34 605 697 679



www.aliadadental.es