



Guided Endo Accesorios para la endodoncia guiada

Fresa ATEC 1,0 mm / Endoseal
REF O.27.28.B044.051 (Largo 21 mm)
O.27.28.B044.052 (Largo 28 mm)

StecoGuide Casquillo Endo para la fresa
ATEC Ref. M.27.28.D100L5

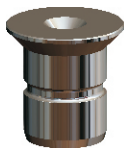

Ampliación del sistema:
Gracias a los casquillos interiores y
exteriores existentes en varios diámetros del
sistema StecoGuide se pueden fabricar
muchas más guías.

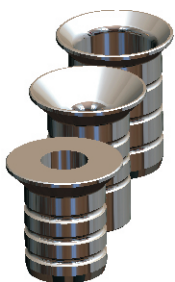


Otros productos de la casa Steco
para su clínica o laboratorio dental

StecoTitanmagnetics®
Prótesis fijada por fuerza
magnética para personas
mayores con movilidad
reducida




StecoGuide
Casquillos de titanio para
cualquier tipo de guía
quirúrgica

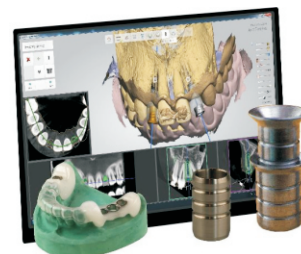

c/ Isabel Colbrand 10 Nave 95
28050 Madrid - España
Tel. + 34 91 736 23 17
Fax. + 34 91 736 23 18
www.kuss-dental.com



GuidedEndo

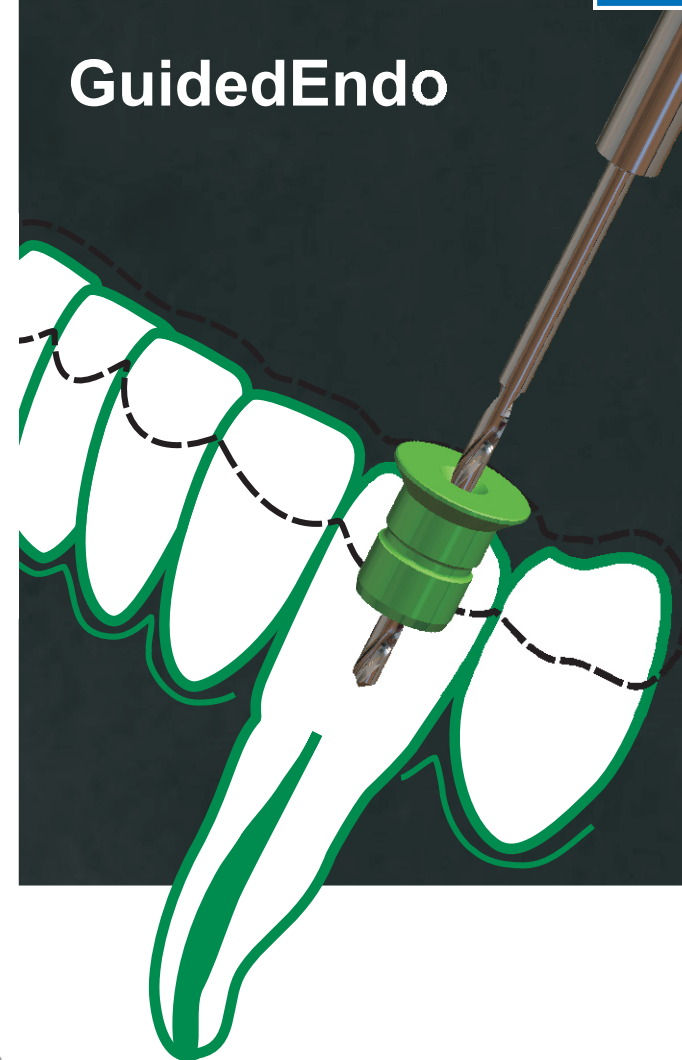

Endodoncia guiada

StecoGuide

La preparación de conductos puede presentar dificultades por falta de control óptico.

La preparación del conducto guiada por casquillo da una seguridad planficable.

Planificación 3D

Se diseña la posición del canal taladrado con la ayuda de un programa de diseño 3D. (p.ej. con coDiagnostiX™ u otros programas).


La geometría tanto de los casquillos como de la fresa se puede introducir en el software.

StecoGuide Casquillo Endo

Se posiciona el casquillo de titanio en el software de planificación el cual se introduce posteriormente en la guía quirúrgica fresada o impresa.

Preparacion del conducto guiada

Gracias al **StecoGuide Casquillo Endo** la fresa espiral ATEC es guiada de forma precisa.

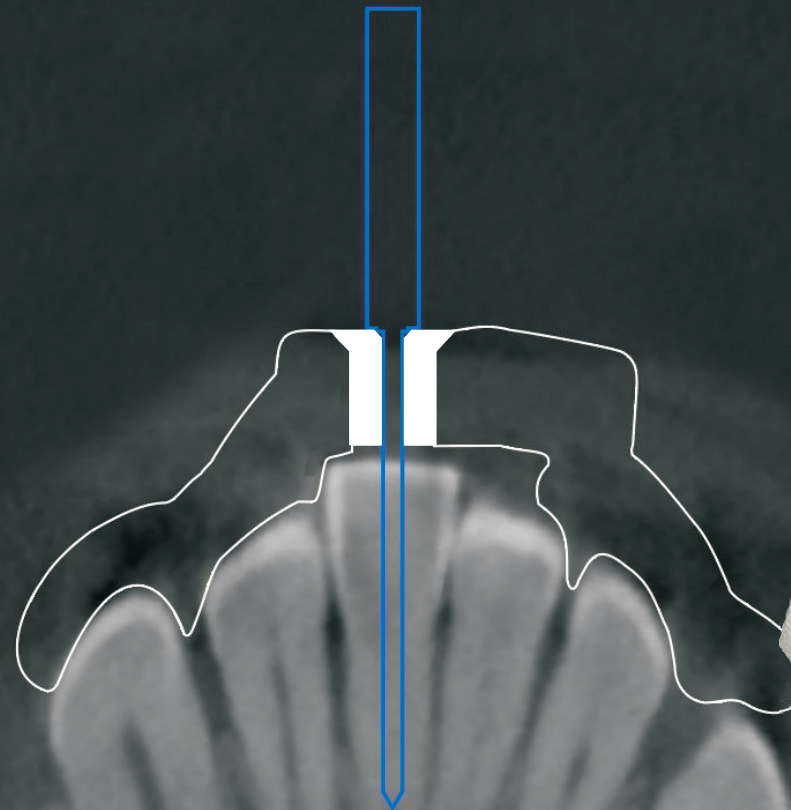

Más información en www.kuss-dental.de